


InterPacs.CaptureDevice Kullanım Klavuzu



**INTERPACS SAĞLIK ÇÖZÜMLERİ
SAN.TİC.LTD.**


- Program ilk açıldığında yapılması ilk gereken görüntünün geldiğinin test edilmesidir.

Bunun için **Görüntü => Görüntü Başlat** butonu ile başlatılır.

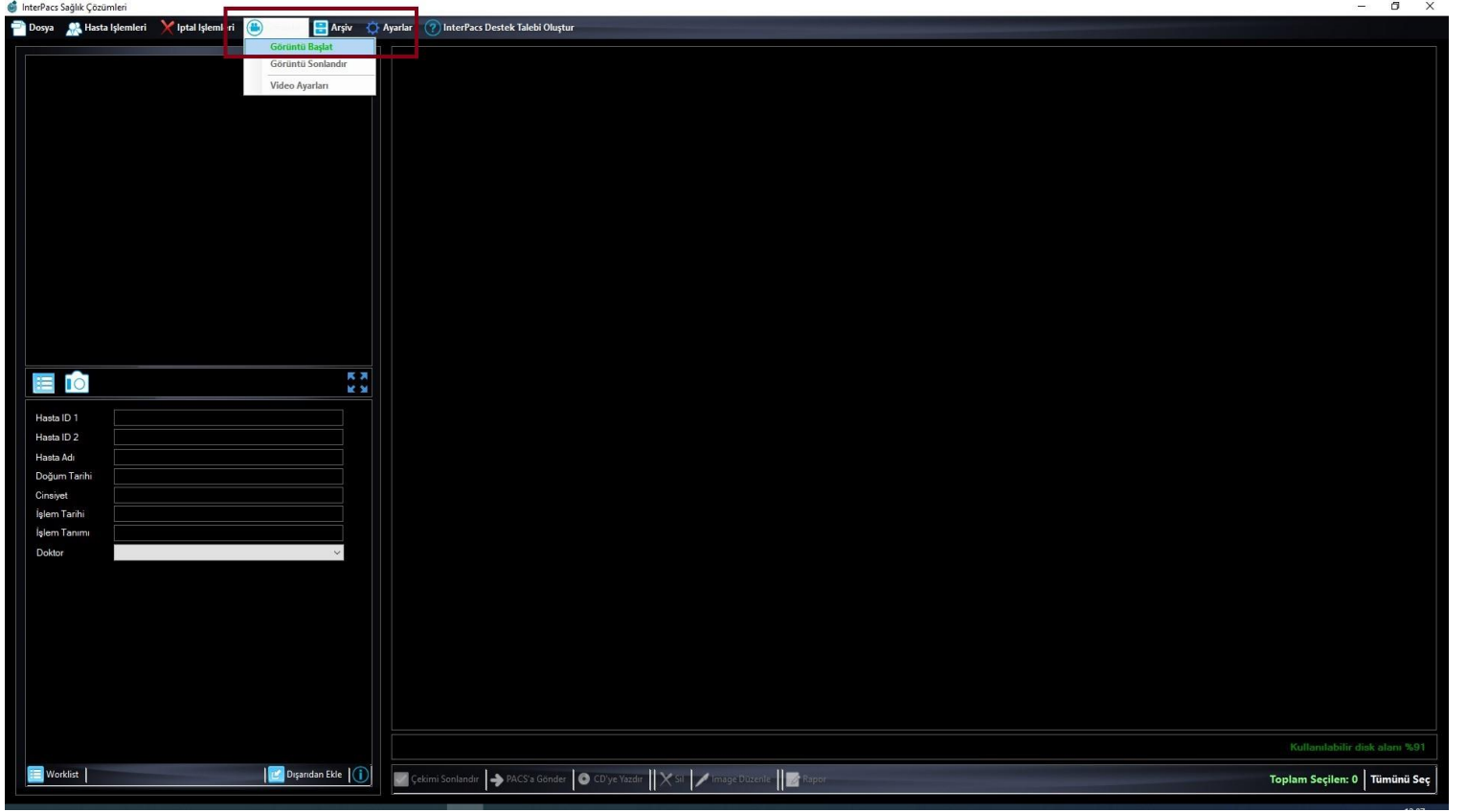

- Görüntü başlatıldıktan sonra **Worklist** butonundan istemi yapılan hasta çift tıklı seçilir.


Aşağıda verilen ekran görüntüsünde worklist butonları kırmızı çerçeve ile belirtilmiştir.

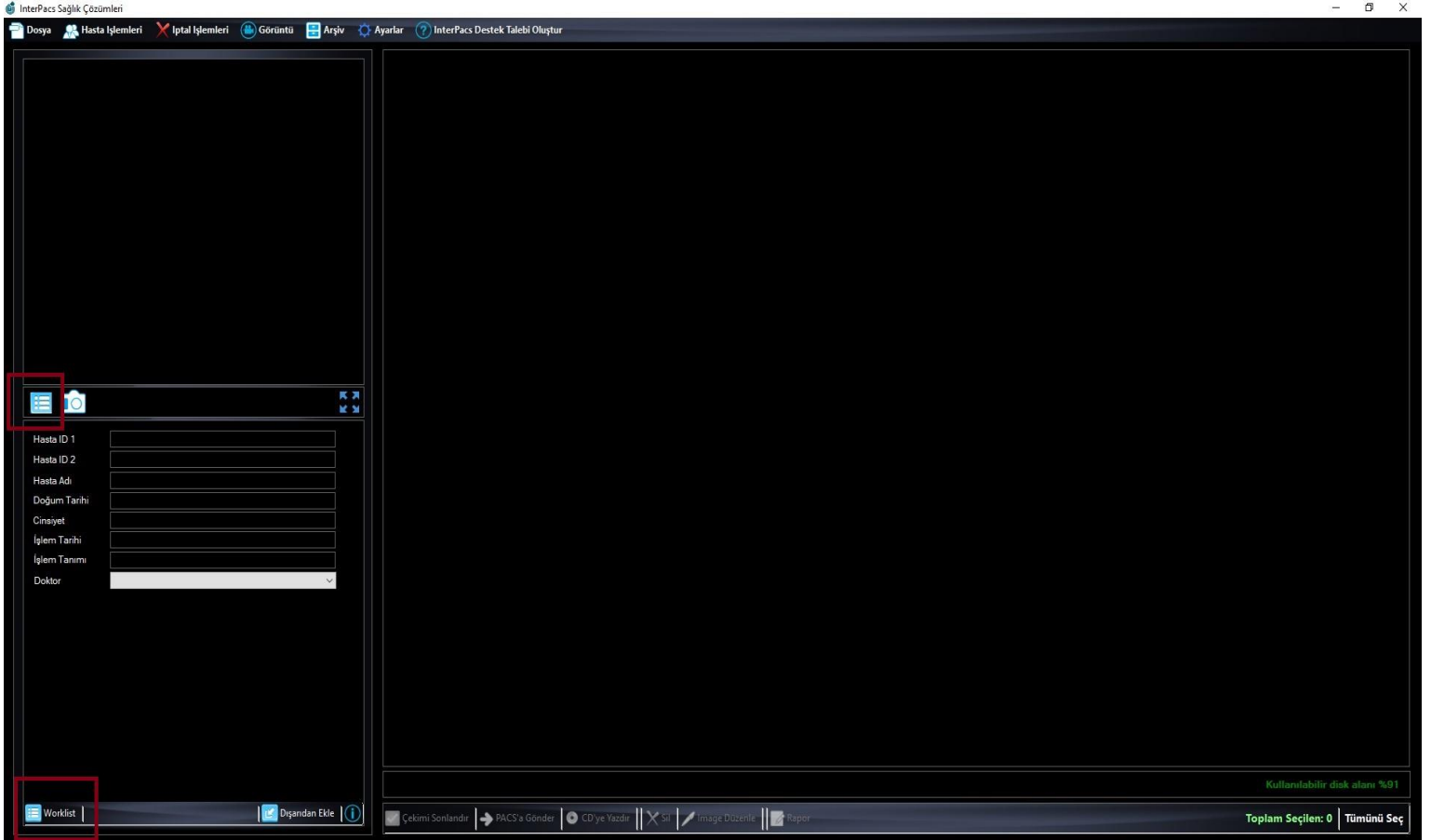


- Hasta seçimi yapıldıktan sonra pedalınız ile görüntü almaya başlayabilirsiniz.

Not: Pedalınız ile ilgili bir aksaklık yaşamamanız durumunda aşağıda kırmızı ile belirtilen kamera ikonu bulunan buton ile program üzerinden ekran görüntüsü alabilirsiniz veya klavyeniz ile de görüntü alabilirsiniz klavyenizden hangi tuşlara basarak görüntü alabileceğiniz ile ilgili sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Not : Video alma işlemi sırasında görüntü de alabilirsiniz.

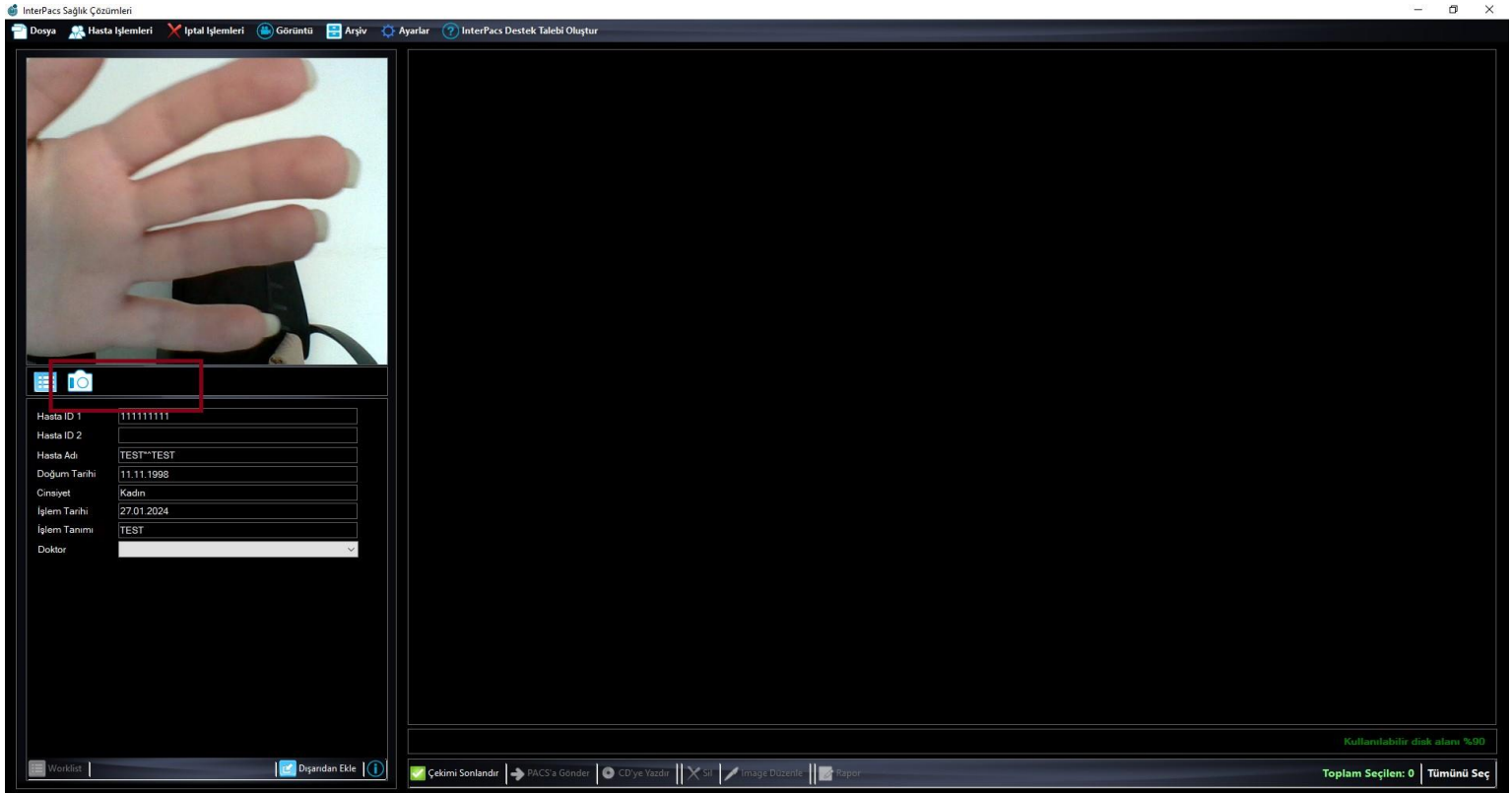


- Görüntü ve video alma işlemleriniz tamamlandıktan sonra mutlaka **Çekimi Sonlandır** butonu ile çekim bitirilmelidir.

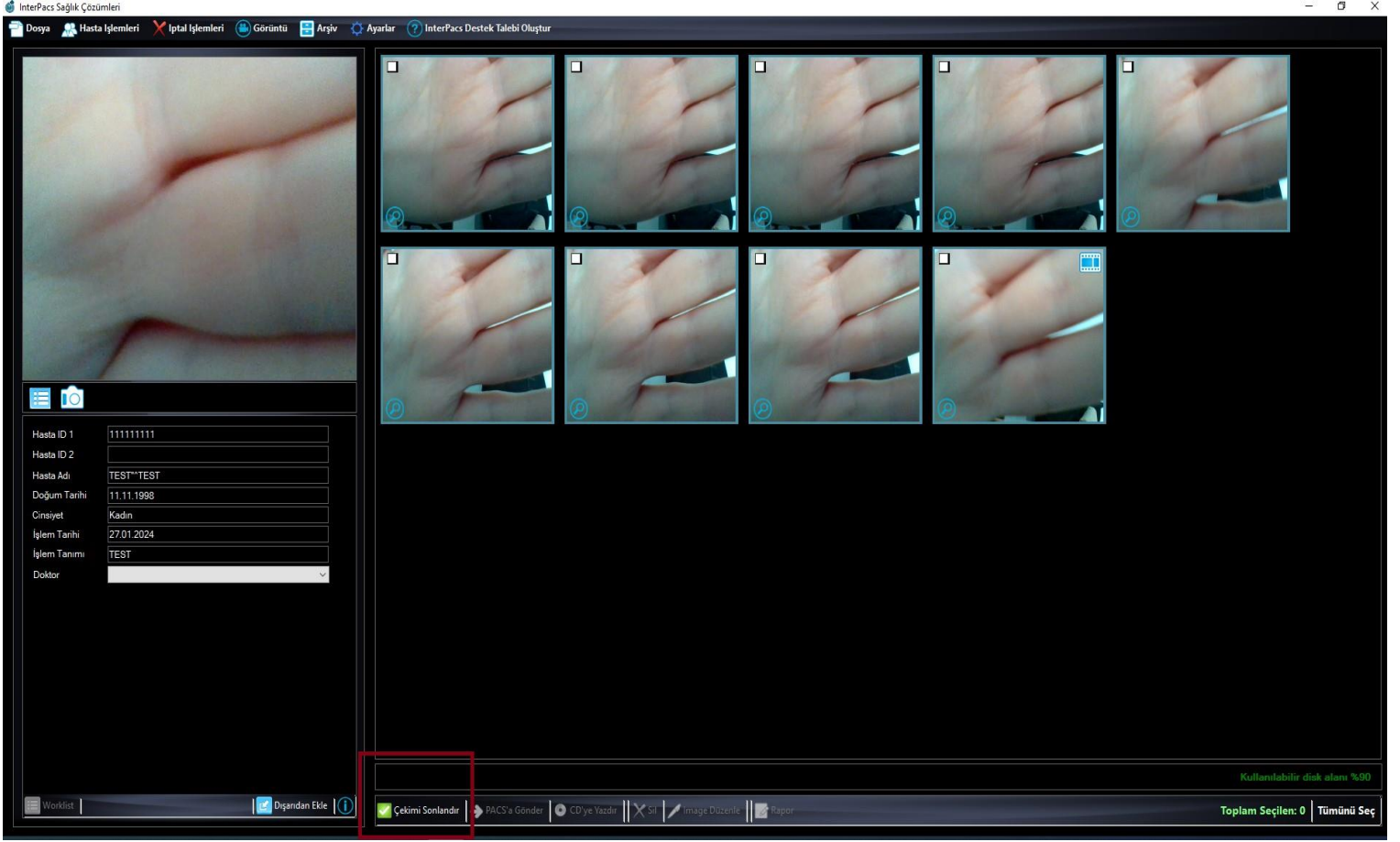


NOT: Çekim sonlandırıldıktan sonra eğer tekrar görüntü almaya devam etmek isterseniz bunun için **İptal İşlemleri** => **Çekim Sonlandırma İşlemini İptal Et** yaptıktan sonra tekrar görüntü almaya devam edebilirsiniz.

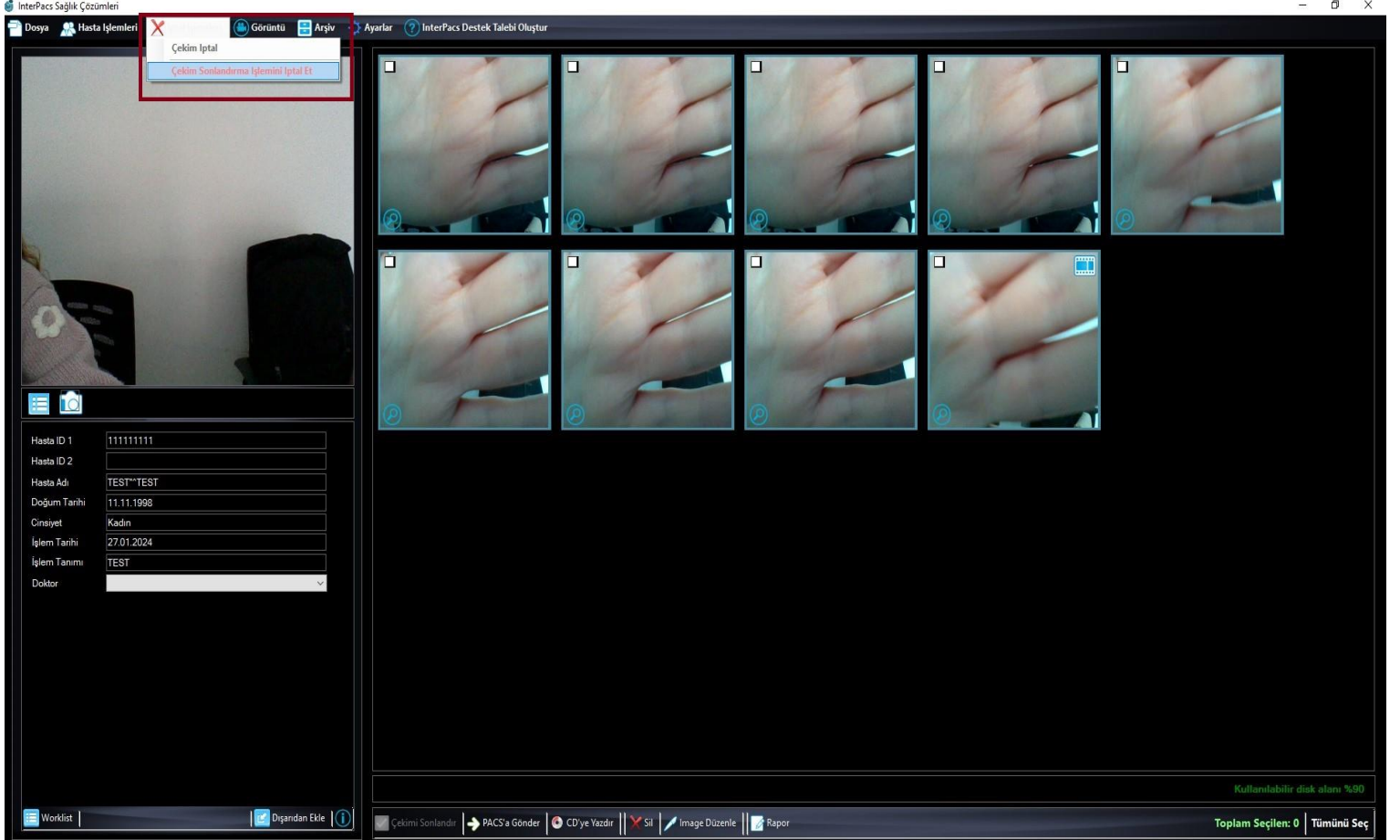

- Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra ya **Tümünü Seç** butonu ile ya da sadece seçtiğiniz görüntüleri **PACS'a Gönder** butonu ile gönderim yapmalısınız.

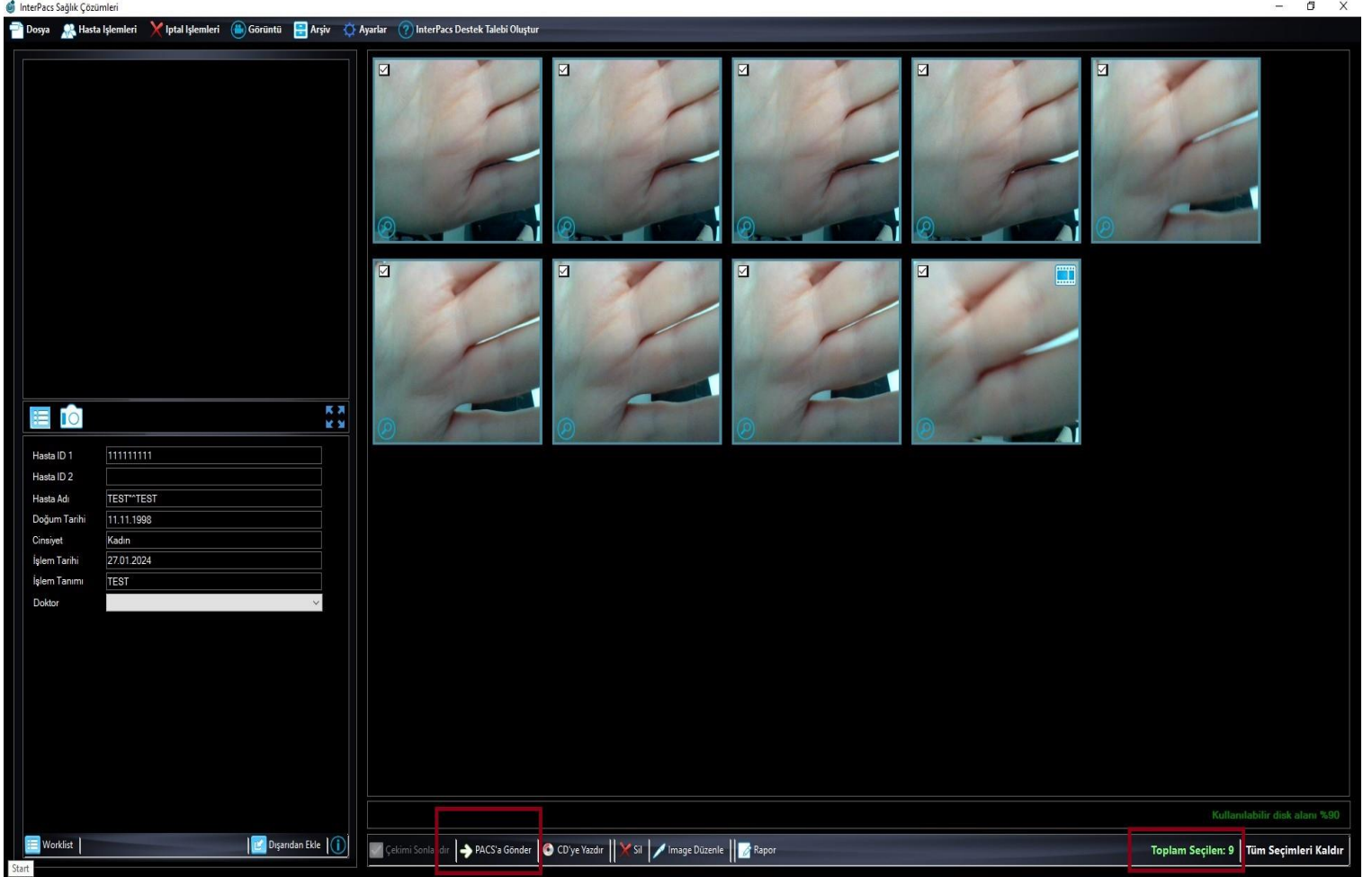

- Aldığınız görüntüleri CD'ye yazdırmak için ilk önce görüntüler seçilir ve kırmızı çerçeve ile belirtilen buton ile yazdırma işlemi yapılır.

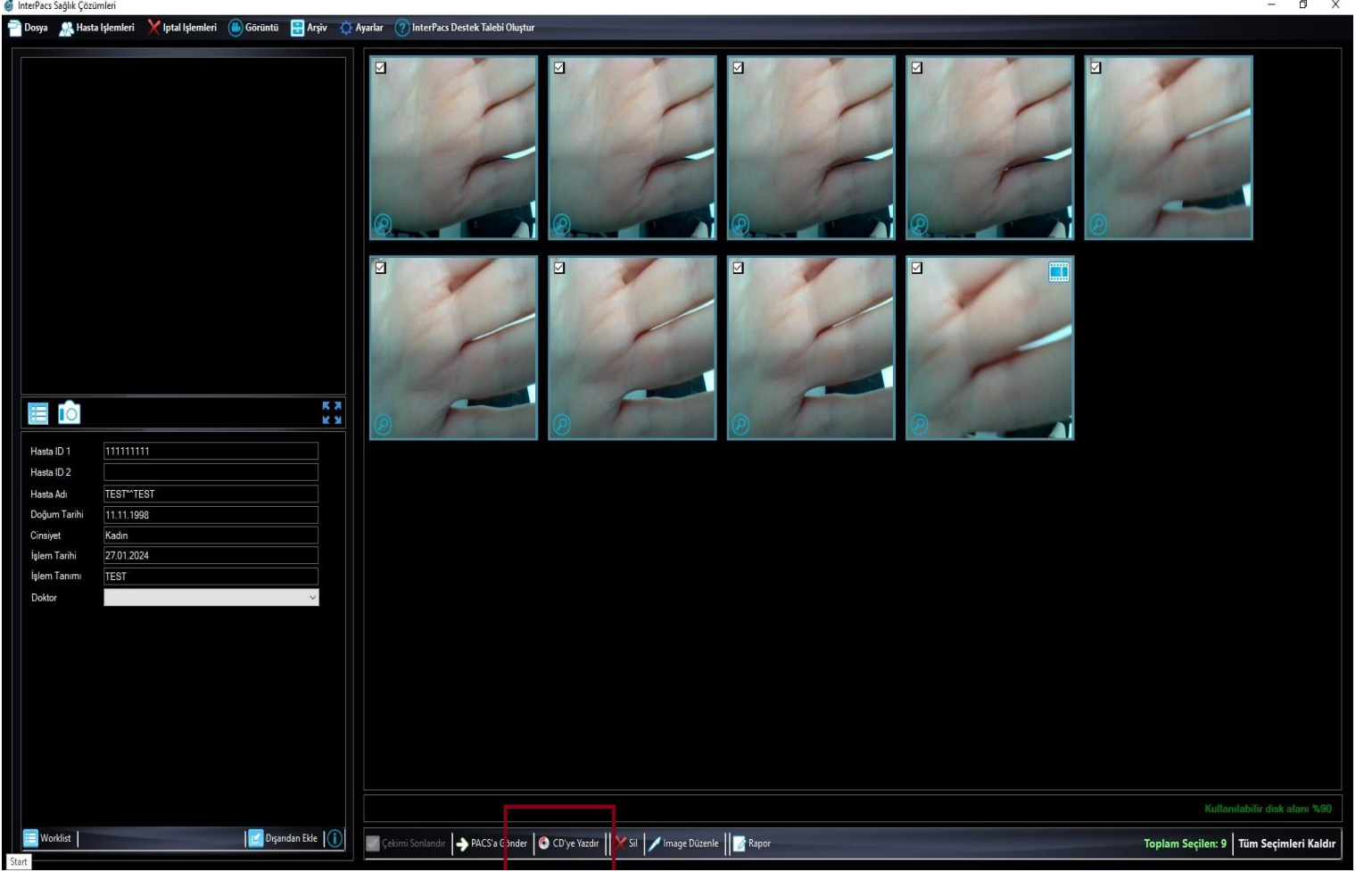

- Bütün bu işlemlerden sonra rapor yazdığınız bilgisayara geçerek

Arşiv => Local Arşiv butonu ile çekimini yaptığınız hastayı çift tıkla seçiyorsunuz

Local Arşiv

ARAMA KRİTERLERİ

TC No

Hasta Adı

Erişim No

İşlem Kodu

İşlem Tanımı

Başlangıç

27/01/2024

Bitiş

27/01/2024

Sorgula


Temizle

HASTA LİSTESİ

Hasta ID 1	Hasta Adı	Hasta ID 2	Doğum Tarihi	Cinsiyet	İşlem Açıklaması	Çekim Tarihi	Çekim Saati	Erişim No	İşlemi Yapan Doktor	Rapor Durumu	Bölüm
123456789	HASTA*TEST		11/11/1997	F	TEST	27/01/2024	00:17:03	987654321		■	

- Hasta seçtikten sonra ekranda 8 tane görüntü seçerek Rapor butonuna tıklayıp rapor yazma ekranı açılır.


NOT: İsterseniz ilk ekranda rapora aktarılabacak görüntüleri seçmeyerek, rapor ekranına geçtiğinizde açılan ekrandaki görüntü kutucuklarına tıklayıp daha sonra sol tarafta listelenen görüntülerden çift tıkla seçerek manuel olarak aktarımda yapabilirsiniz.

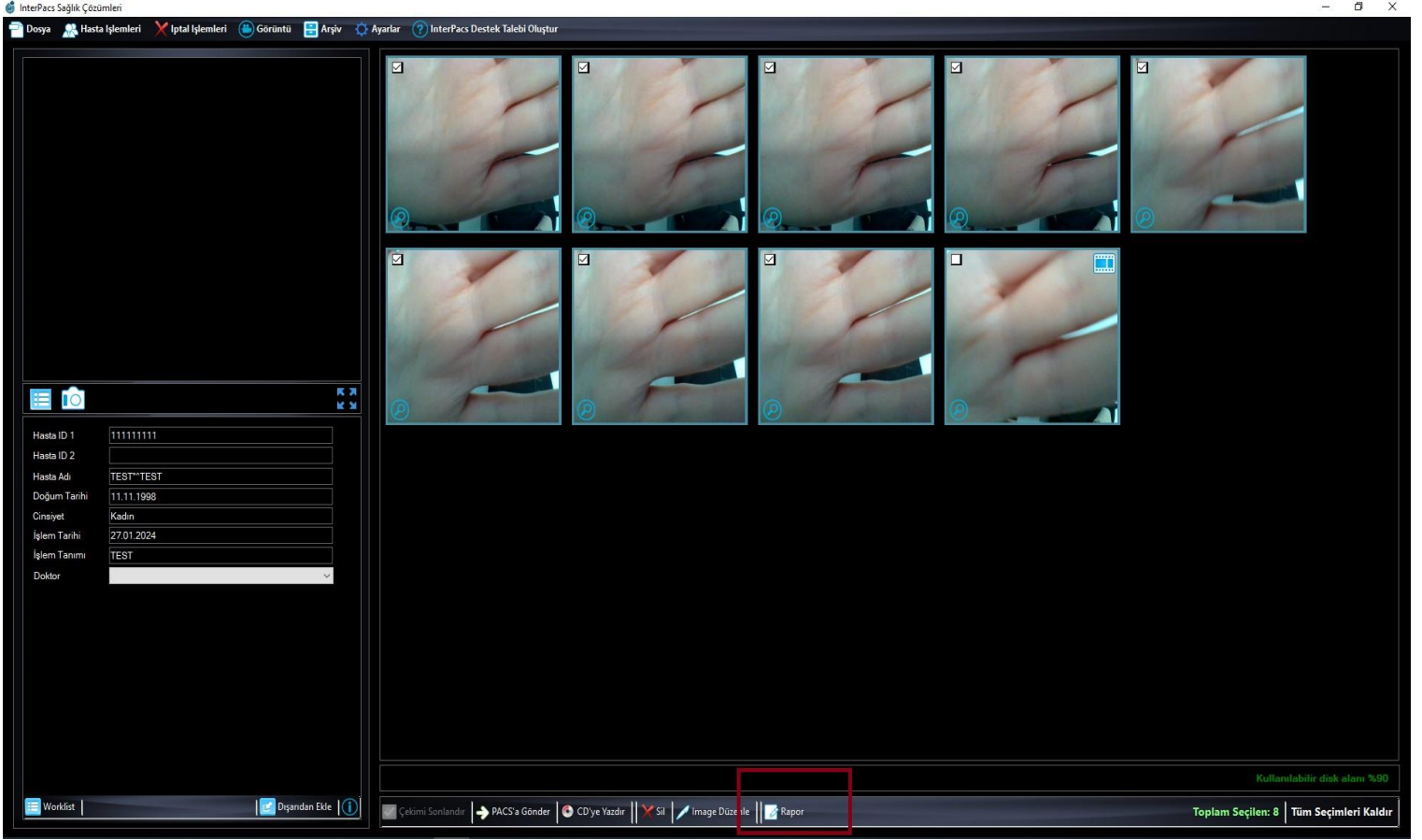


- Rapor ekranı açıldığında aşağıda belirtilen alandan şablon seçimi yapılır ve rapor yazma işlemi yapılır. Daha sonra **Raporu Kaydet** butonu ile rapor kaydedilir.


Hasta Rapor

Hasta ID: 123456789
Ad Soyad: HASTA TEST
Şablon:

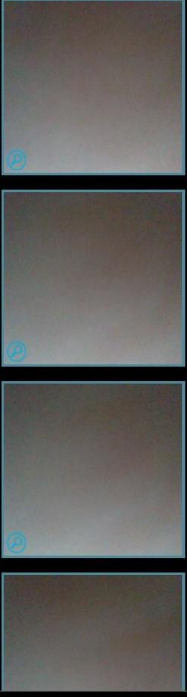

File Edit View Insert Format Tools

↶ ↷ **B** *I*  Times New R... 12pt ⋮



Hastane Adı
Radyoloji Sonuç Raporu

Hasta ID:	123456789	Hasta Adı:	TEST HASTA
Doğum Tarihi:	11/11/1997	İşlem Tarihi:	27/01/2024

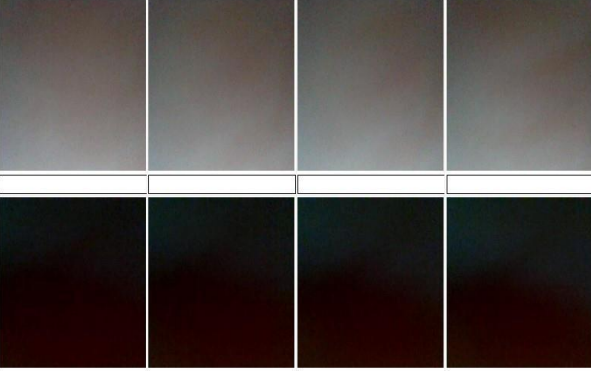

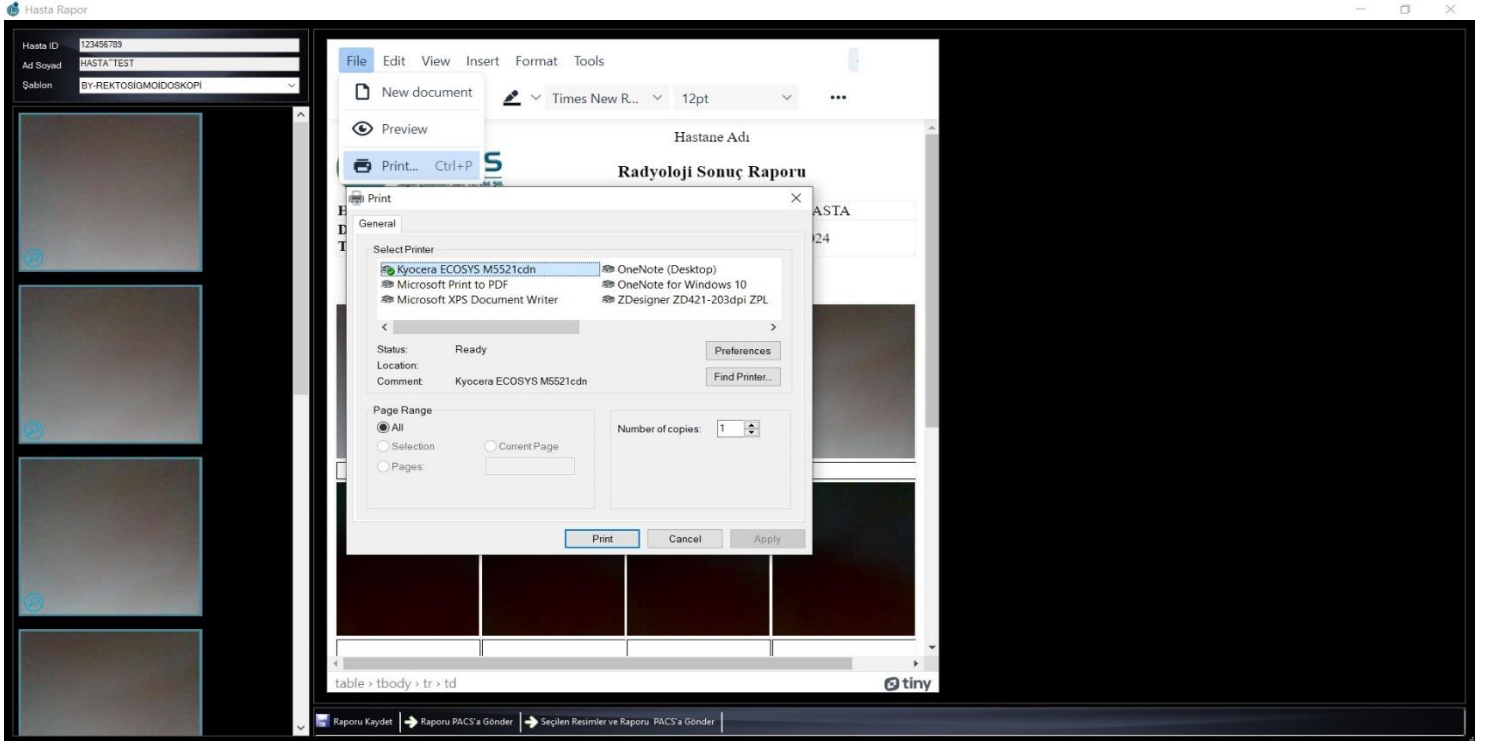


table > tbody > tr > td > div 

Raporu Kaydet Raporu PACS'a Gönder Seçilen Resimler ve Raporu PACS'a Gönder

- Raporu yazdırmak için **File => Print** butonu ile açılan ekrandan yazıcıyı seçerek raporu yazdırabilirsiniz. Veya print ekranında **Microsoft Print to PDF** butonuna tıklayarak masaüstüne veya istediğiniz yere PDF olarak kaydedebilirsiniz.




ÖNEMLİ NOT

Rapor ekranına geçtiğinizde kırmızı çerçeve ile belirtilen Seçilen Resimler ve Raporu PACS'a Gönder butonu aşağıda gösterilmiştir.

Bu butonun işlevi isterseniz görüntü aldığınız ekrandaki PACS'a gönder butonu ile göndermek yerine sadece rapora eklediğiniz görüntülerin PACS'a gönderilmesini isterseniz kullanabilirsiniz.


Bu buton sadece raporu ilk yazıp kaydettiğinizde aktif olur rapor üzerinde düzenleme yapmak için tekrar açtığınızda aktif olmaz.

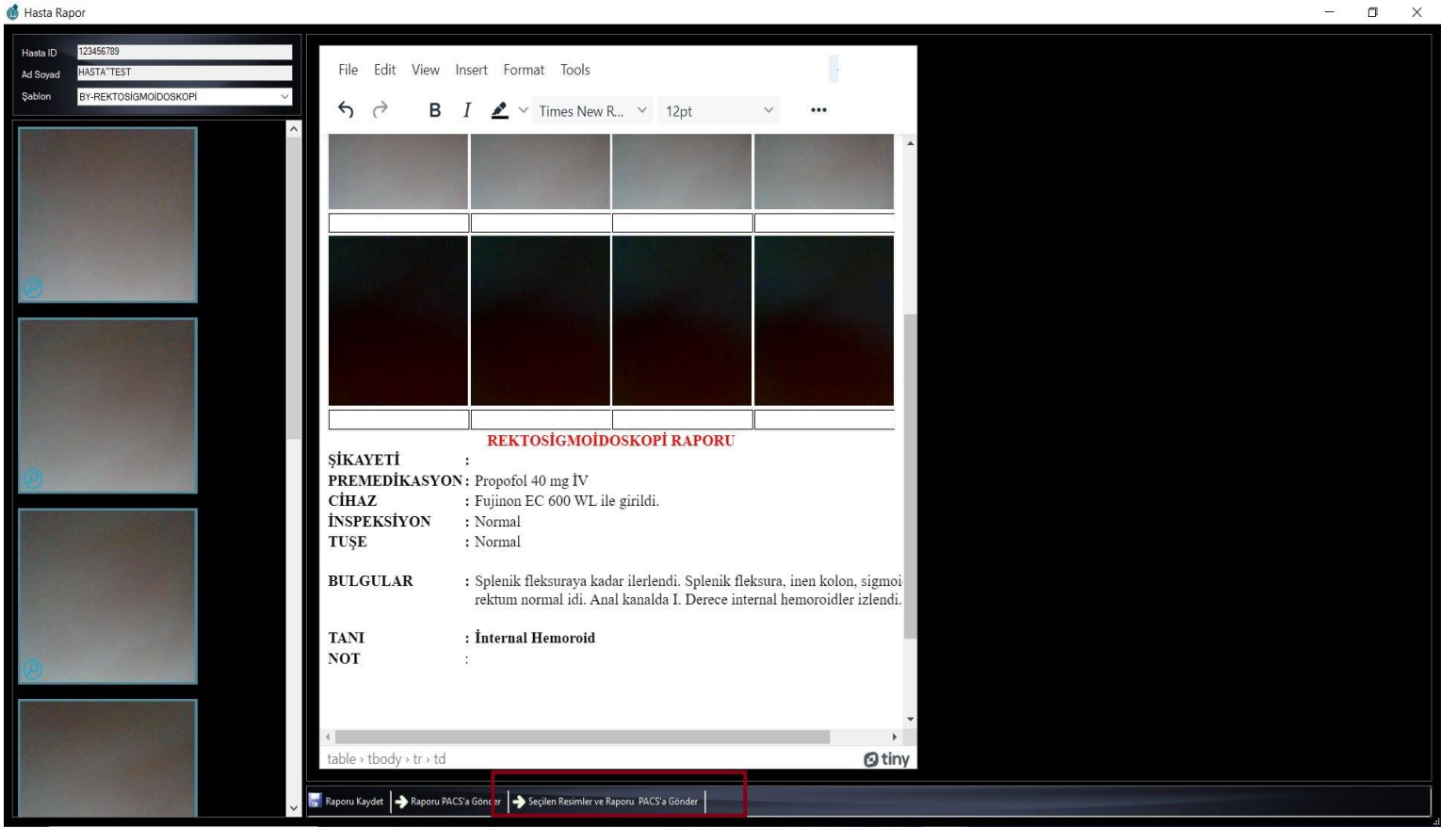

NOT : Videodan ekran görüntüsü almak isterseniz bunun için video üzerinde çift tıklayıp Videodan görüntü alıp kaydedebilirsiniz.



Videonun başlatıldığı buton. Bu buton ile video başlatılır ve görüntü alınmak istenen yerde durdurulur.

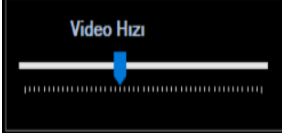


Video hızını burdan ayarlayabilirsiniz




Görüntü almak için kullanılır.

En son görüntüler alındıktan sonra bunu belirtilen **Kaydet** butonu ile aldığımız görüntüleri kaydediyoruz.

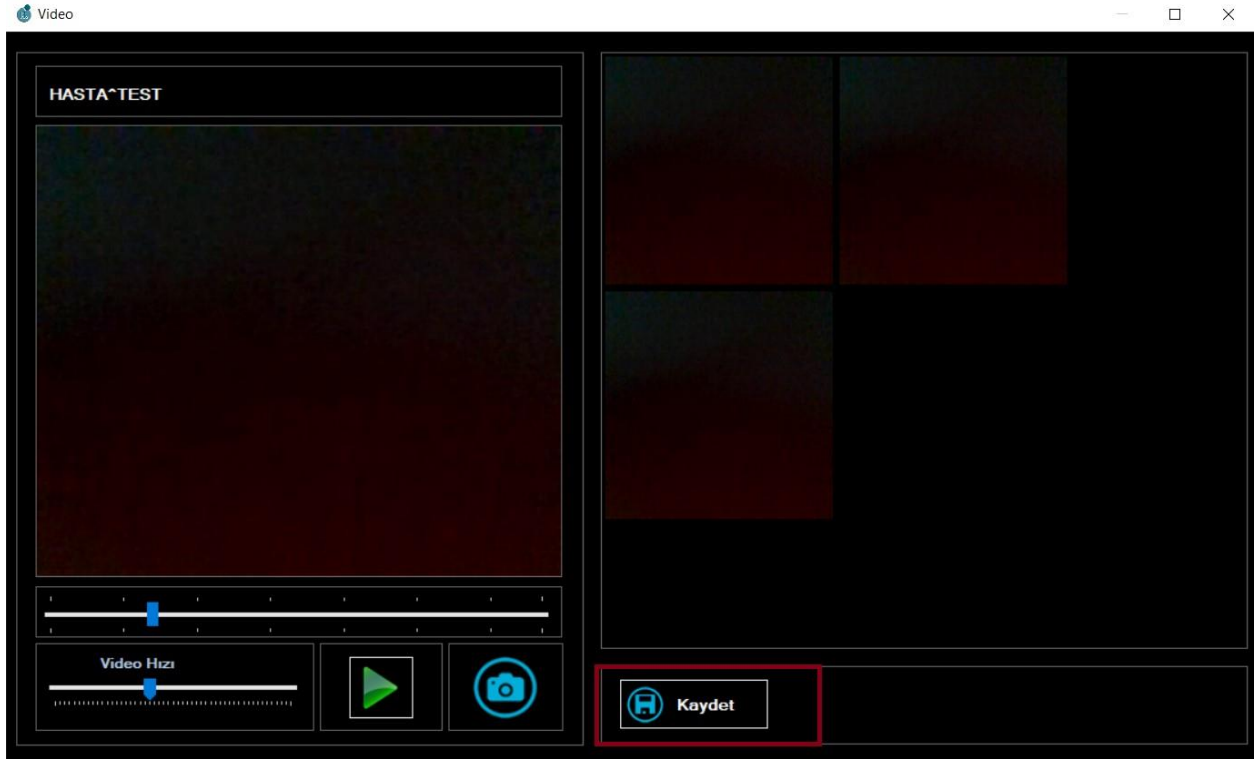


NOT: USB de veya herhangi bir yerde bulunan endoskopi görüntülerini bu programa aktararak PACS'a göndermek için, hasta seçimi yapıldıktan sonra kırmızı çerçeve ile belirtilen **Dışarıdan Ekle** butonu ile görüntülerin bulunduğu klasör açılır ve görüntüler seçilerek **Aç** butonuna tıklanılması gerekmektedir. Daha sonra seçilen görüntüler PACS'a gönderilir.

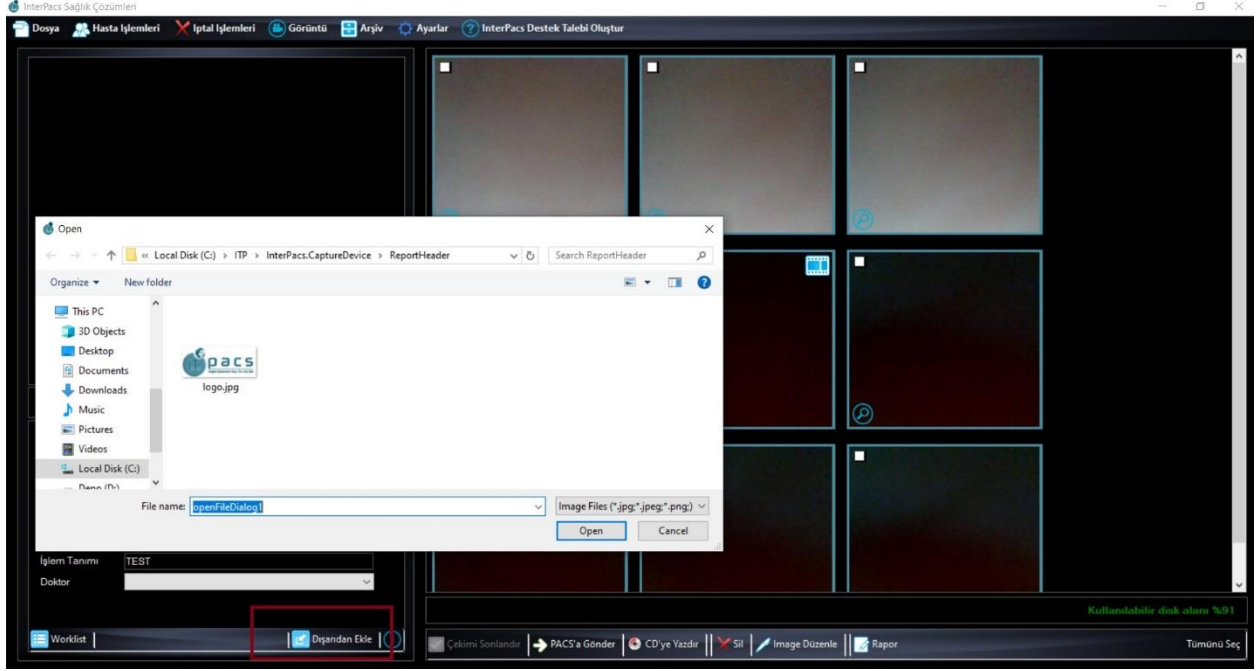

- Çekim sonlandıktan sonra veya devam ederken hasta bilgilerinde değişiklik yapılması istenirse (örneğin istem iptali veya yeni istem yapılması gibi bilgi değişikliği oluşan durumlarda) hasta verileri PACS'a gönderilmeden bilgiler güncellenmelidir.

Bu işlemi yapmak için info butonu kullanılır.

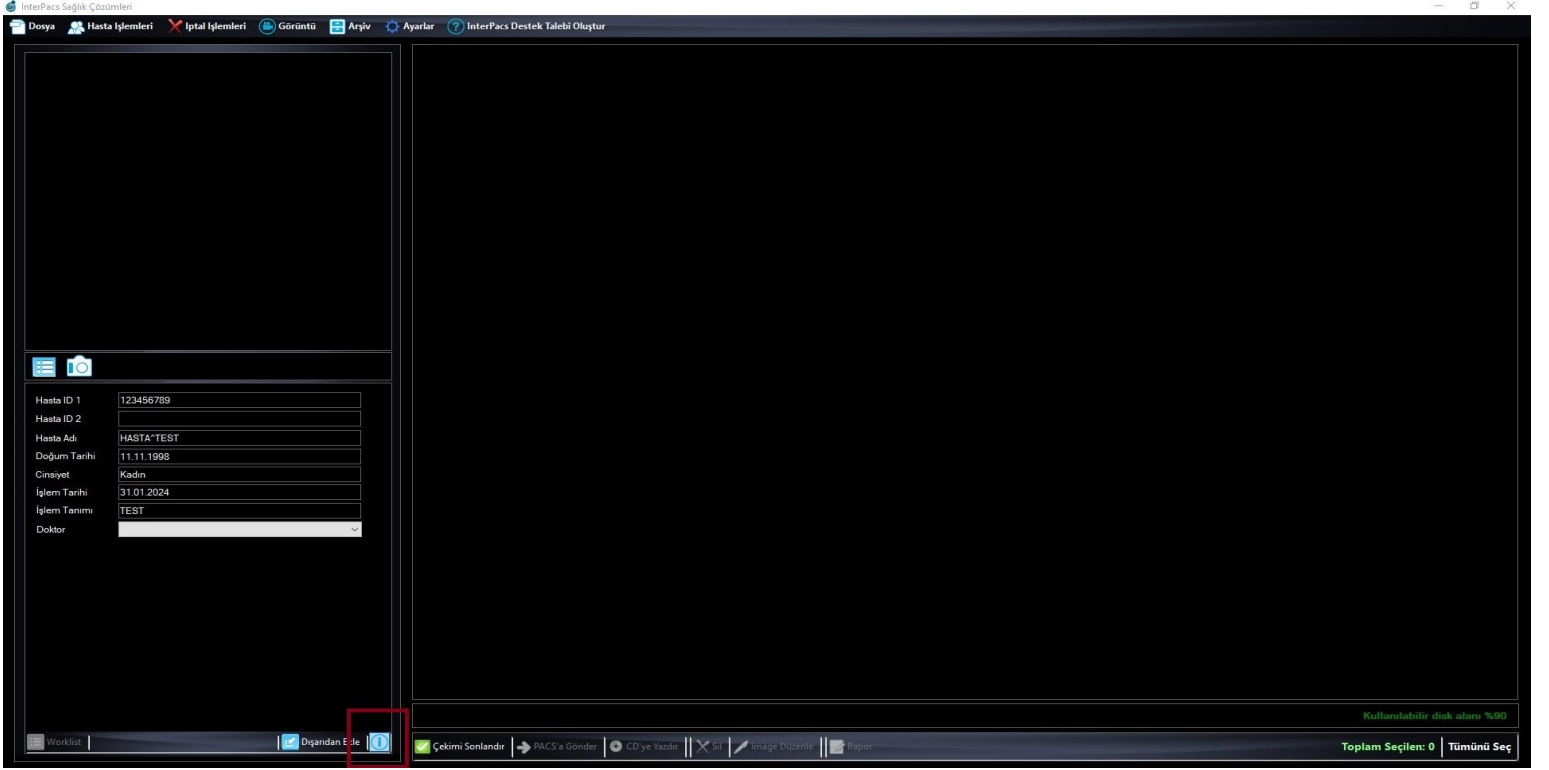

Bu butona tıkladıktan sonra bilgiler güncellenip daha sonra PACS'a gönderilir.

Not: HBYS'den istem girildiği için açılan ekranda sadece yeni erişim numarasının girilmesi yeterli olacaktır